


WISHOWER

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE



ACCESSOIRES OBLIGATOIRES POUR LE SOIN HYGIÉNIQUE

(VOIR LA FICHE DES ACCESSOIRES POUR PLUS DE DÉTAILS)

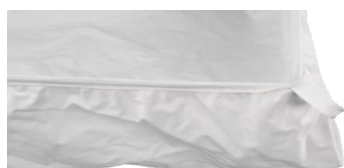

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Étapes à suivre

1. Branchez l'appareil à l'aide du fil d'alimentation près d'un accès à l'eau (salle de bain ou zone de bain).



2. Veuillez compléter le paramétrage désiré : sélectionnez le bouton « **Option** » afin de choisir la langue, l'heure, le format 12h ou 24h de l'heure, degrés Fahrenheit ou degrés Celsius, le thème noir ou blanc de l'écran numérique ainsi que le réglage de la luminosité.



3. Remplissez d'eau chaude l'ouverture du réservoir d'eau propre de l'appareil jusqu'à ce que les quatre (4) barres de niveau d'eau apparaissent sur l'écran numérique tactile. Pour minimiser le temps de réchauffement de l'eau, veuillez porter attention à la variation de la température lors du remplissage et l'ajuster au besoin. Vous remarquerez que le réservoir d'eau propre aura atteint sa capacité maximale dès que la quatrième barre apparaîtra à l'écran.



- **Avertissement :** Assurez-vous de ne jamais remplir l'appareil sans surveillance afin d'éviter les débordements. Lors du remplissage, cessez de remplir l'appareil dès que vous apercevez le 4ème indicateur de niveau, soit la 4e barre lumineuse à l'écran, afin de **ne pas dépasser la capacité maximale** du réservoir d'eau propre.



- **Avertissement :** Par mesure de sécurité, le dispositif de sécurité interne empêchera l'activation de l'appareil si la température de l'eau **atteint ou dépasse 40 °C (104°F)**. L'écran numérique affichera un avertissement visuel (réservoir d'eau propre en rouge) et sera accompagné d'une alarme sonore pour attirer l'attention de l'opérateur sur l'écran.

4. Débranchez et amenez l'appareil ainsi que les accessoires Wishower à la chambre du résident.
5. Placez la Wishower face au pied du lit, et branchez de nouveau le fil électrique. L'écran numérique se rallumera automatiquement.



6. Engagez et sécurisez les deux freins à pied sur roues avant.



7. Sélectionnez la température de l'eau désirée à partir de l'écran de contrôle tactile numérique, soit 37°C ou 38°C (98.6°F ou 100.4°F). Le réchauffement de l'eau se fait automatiquement en quelques minutes.



8. Installation du patient au lit:

- **Si le patient n'est pas dans son lit :** Accrochez les 4 pinces au pied et à la tête du lit. Installez le drap de bain sur le lit. Placez la housse de lit imperméable au-dessus du drap de bain et accrochez les 4 œillets de la housse au pied et à la tête du lit à l'aide des pinces.
- **Si le patient est dans son lit :** Accrochez les 4 pinces au pied et à la tête du lit. Tournez le patient sur le côté. Glissez le drap de bain sous lui et glissez la housse de lit imperméable au-dessus du drap de bain. Accrochez 2 œillets de la housse au pied et à la tête du lit à l'aide des pinces et répétez cette étape pour l'autre côté du lit.



9. Déshabillez le patient. Il est recommandé d'apposer une serviette pour recouvrir les parties intimes du patient. Celle-ci pourra être déplacée au besoin lors du soin.


10. Sur le tableau numérique, appuyez sur les boutons « **Douche** » et « **Succion** » afin de démarrer la douche au lit (**bleu**= fonction inactive, **vert**= fonction active).




11. Appuyez sur le bouton noir de la douchette pour le débit d'eau et testez sa température et son débit dans votre paume de main, loin du patient.



12. Aspirez simultanément l'eau dans la housse de lit imperméable avec le boyau d'aspiration.

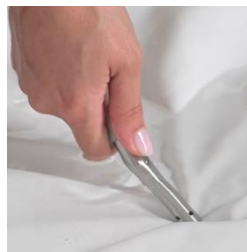

13. Une fois terminé, ramenez les deux boyaux sur l'appareil et débranchez la Wishower pour l'arrêter.
14. Tournez et retournez le patient pour retirer la housse de lit imperméable souillée en la pliant et en la repliant sous lui. Le retrait s'effectue un côté à la fois.

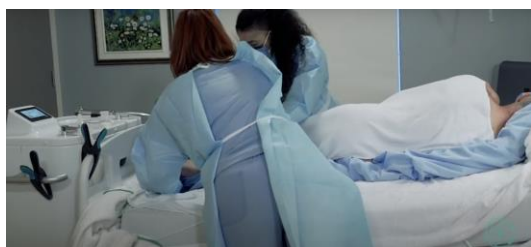

15. Disposez de la housse de lit imperméable souillée.
16. Enveloppez le patient dans la serviette drap de bain pour le sécher.
17. Habillez le patient (procédure habituelle de toilette du patient).
18. Apportez la housse de lit imperméable réutilisable et la serviette drap de bain réutilisable à la salle de lavage.

Pour obtenir les directives sur le lavage et d'entretien recommandées des accessoires, veuillez consulter la section intitulée « Les Accessoires » du Manuel d'utilisation officiel. Nous proposons également des accessoires à usage unique. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter votre représentant.

Après chaque soin hygiénique

Veuillez procéder au Processus de désinfection tout en respectant le Protocole de prévention des infections et pratiques recommandées.